

COMPARAISON INTERLABORATOIRES "RAEMA"

CAMPAGNE RAEMA Poudre No 81

(30 SEPTEMBRE 2025)
RAPPORT INDIVIDUEL



"Toute reproduction du présent rapport doit se faire dans son intégralité."

"L'utilisation du logo Cofrac ne peut se faire en dehors de ce rapport."

"Les données confidentielles contenues dans le rapport concernent uniquement le laboratoire."

LABORATOIRE No

Note : Dans l'ensemble du rapport individuel, vos résultats sont traités selon l'ordre des échantillons suivant :

Echantillons N° : 114308 / 533361 / 144820 / 362276 / 599048

Rapport autorisé par M. CARLIER, L. ALI-MANDJEE et E. RIOUALL

Edition : le 1er décembre 2025

page 1 / 26

Consulter le rapport général pour interpréter les statistiques de performance

Campagne No 81 du 30 septembre 2025

Laboratoire No

RESULTATS JUSTESSE –MICRO–ORGANISMES AEROBIES MESOPHILES

Méthode utilisée : ISO/NF EN ISO 4833-1(+A1)

Vos résultats (ufc/g) : 110000 / 120000 / 110000 / 150000 / 120000

(log10 ufc/g) : 5.04 / 5.08 / 5.04 / 5.18 / 5.08

Moyenne : 5.08

Score z : -1.03

(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

Résultats des laboratoires

Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 302

Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse statistique : 280


Valeur assignée de la contamination : 5.15

Ecart-type pour l'évaluation de l'aptitude : 0.06


Nb laboratoires satisfaisants ($-2.0 \leq z \leq 2.0$) : 266

Nb signes avertissement ($-3.0 < z < -2.0$ ou $2.0 < z < 3.0$) : 20

Nb signes action ($z \leq -3.0$ ou $z \geq 3.0$) : 16

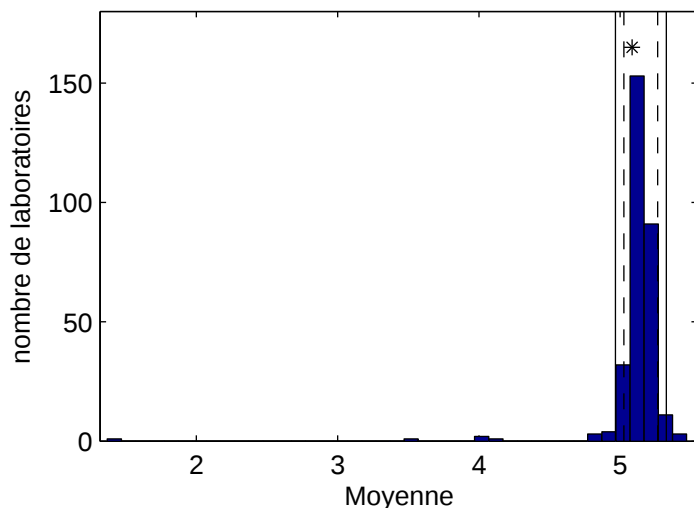

Evolution de votre performance

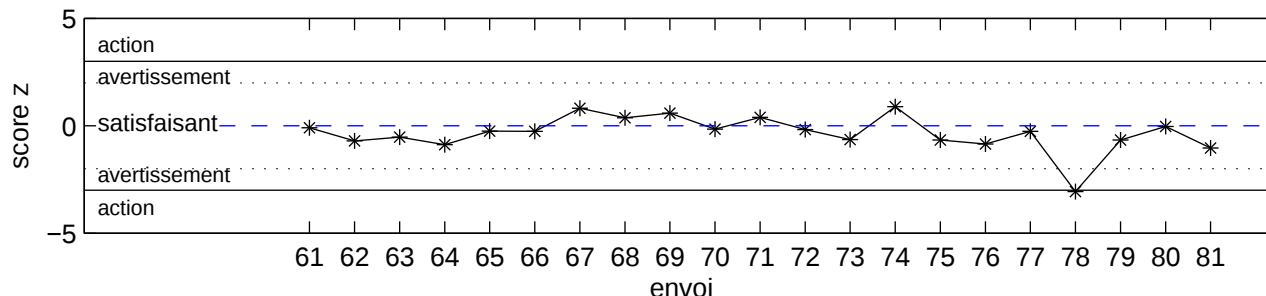

Edition : le 1er décembre 2025

page 2 / 26

Campagne No 81 du 30 septembre 2025

Laboratoire No RESULTATS JUSTESSE –ENTEROBACTERIES


Méthode utilisée : NF V 08-054

Vos résultats (ufc/g) : 300 / 630 / 560 / 440 / 600

(log10 ufc/g) : 2.48 / 2.8 / 2.75 / 2.64 / 2.78

Moyenne : 2.69 Groupe : 1 Score z : -1.52

(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

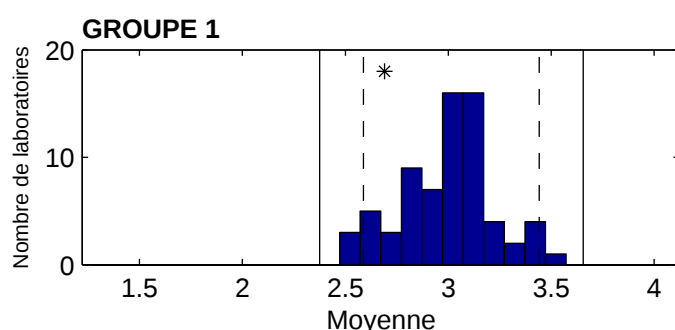

Résultats des laboratoires du groupe 1

Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 70

Nombre de laboratoires inclus

dans l'analyse statistique : 64


Valeur assignée de la contamination : 3.02

Ecart-type pour l'évaluation de l'aptitude : 0.213

Nb laboratoires satisfaisants ($-2.0 \leq z \leq 2.0$) : 62

Nb signes avertissement ($-3.0 < z < -2.0$ ou $2.0 < z < 3.0$) : 8

Nb signes action ($z \leq -3.0$ ou $z \geq 3.0$) : 0

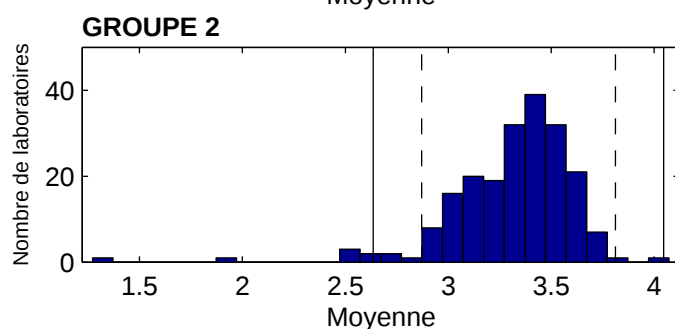

Résultats des laboratoires du groupe 2

Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 206

Nombre de laboratoires inclus

dans l'analyse statistique : 193

Valeur assignée de la contamination : 3.34


Ecart-type pour l'évaluation de l'aptitude : 0.235

Nb laboratoires satisfaisants ($-2.0 \leq z \leq 2.0$) : 195

Nb signes avertissement ($-3.0 < z < -2.0$ ou $2.0 < z < 3.0$) : 5


Nb signes action ($z \leq -3.0$ ou $z \geq 3.0$) : 6

Evolution de votre performance

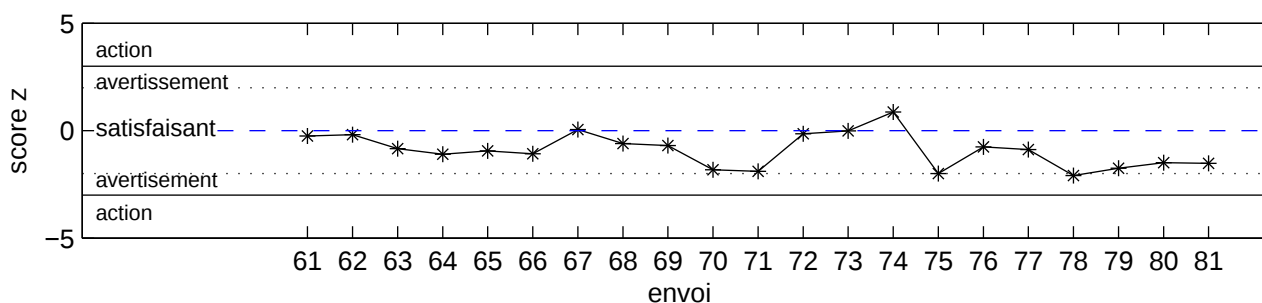

Campagne No 81 du 30 septembre 2025
Laboratoire No
RESULTATS JUSTESSE –COLIFORMES TOTAUX
Méthode utilisée : NF V 08-050
Vos résultats (ufc/g) : 360 / 640 / 580 / 520 / 960
(log10 ufc/g) : 2.56 / 2.81 / 2.76 / 2.72 / 2.98
Moyenne : 2.77 Groupe : 2 Score z : -1.58
(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)


GROUPE 1

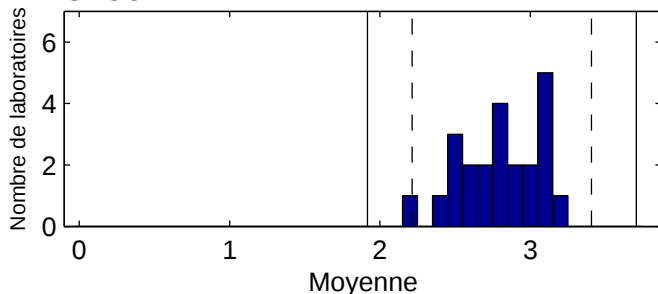

Résultats des laboratoires du groupe 1

Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 23
Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse statistique : 23
Valeur assignée de la contamination : 2.81
Ecart-type pour l'évaluation de l'aptitude : 0.298
Nb laboratoires satisfaisants ($-2.0 \leq z \leq 2.0$) : 23
Nb signes avertissement ($-3.0 < z < -2.0$ ou $2.0 < z < 3.0$) : 0
Nb signes action ($z \leq -3.0$ ou $z \geq 3.0$) : 0


GROUPE 2

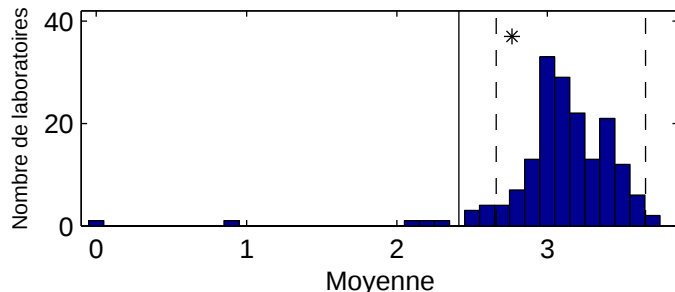

Résultats des laboratoires du groupe 2

Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 174
Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse statistique : 158
Valeur assignée de la contamination : 3.16
Ecart-type pour l'évaluation de l'aptitude : 0.248
Nb laboratoires satisfaisants ($-2.0 \leq z \leq 2.0$) : 160
Nb signes avertissement ($-3.0 < z < -2.0$ ou $2.0 < z < 3.0$) : 9
Nb signes action ($z \leq -3.0$ ou $z \geq 3.0$) : 5


GROUPE 3

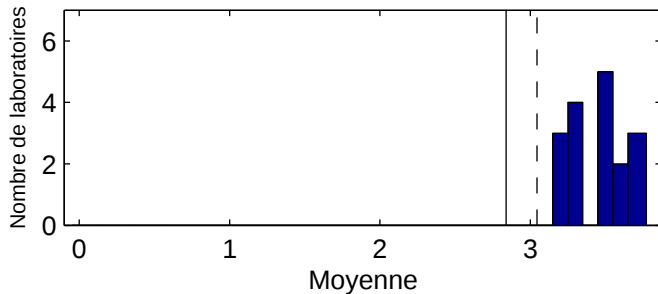

Résultats des laboratoires du groupe 3

Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 17
Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse statistique : 17
Valeur assignée de la contamination : 3.46
Ecart-type pour l'évaluation de l'aptitude : 0.206
Nb laboratoires satisfaisants ($-2 \leq z \leq 2$) : 17
Nb signes avertissement ($-3.0 < z < -2.0$ ou $2.0 < z < 3.0$) : 0
Nb signes action ($z \leq -3.0$ ou $z \geq 3.0$) : 0

Evolution de votre performance

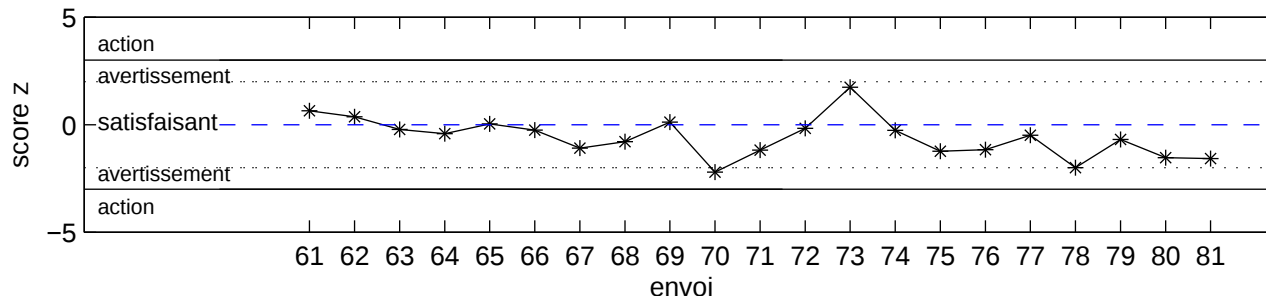

Campagne No 81 du 30 septembre 2025

Laboratoire No

RESULTATS JUSTESSE –COLIFORMES THERMOTOLERANTS

Méthode utilisée : NF V 08–060


Vos résultats (ufc/g) : 240 / 270 / 360 / 230 / 300

(log10 ufc/g) : 2.38 / 2.43 / 2.56 / 2.36 / 2.48

Moyenne : 2.44

Score z : –2.08

(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

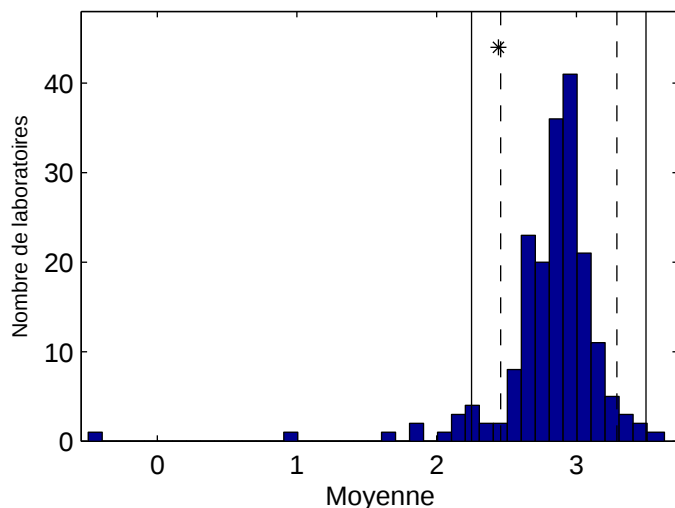

Résultats des laboratoires

Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 188

Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse statistique : 174

Valeur assignée de la contamination : 2.87


Ecart-type pour l'évaluation de l'aptitude : 0.208

Nb laboratoires satisfaisants ($-2.0 \leq z \leq 2.0$) : 166

Nb signes avertissement ($-3.0 < z < -2.0$ ou $2.0 < z < 3.0$) : 11

Nb signes action ($z \leq -3.0$ ou $z \geq 3.0$) : 11

Evolution de votre performance

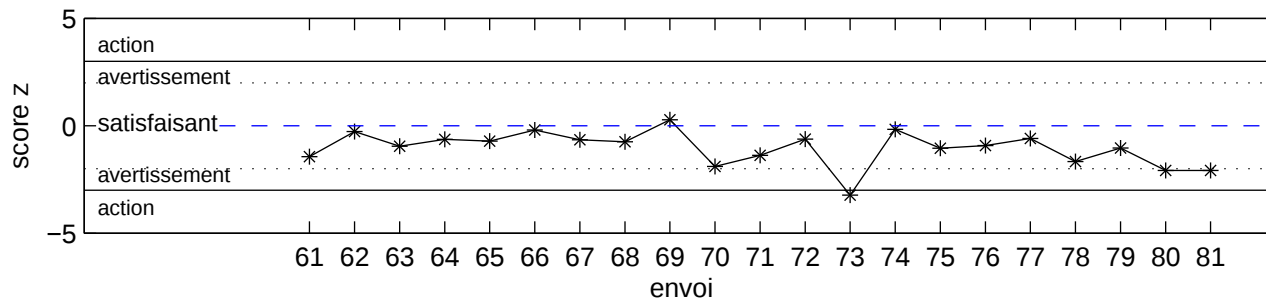

Campagne No 81 du 30 septembre 2025

Laboratoire No

RESULTATS JUSTESSE –*ESCHERICHIA COLI*

Méthode utilisée : ISO/NF ISO 16649-2


Vos résultats (ufc/g) : 230 / 350 / 300 / 400 / 350

(log10 ufc/g) : 2.36 / 2.54 / 2.48 / 2.6 / 2.54

Moyenne : 2.5

Score z : -1.31

(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

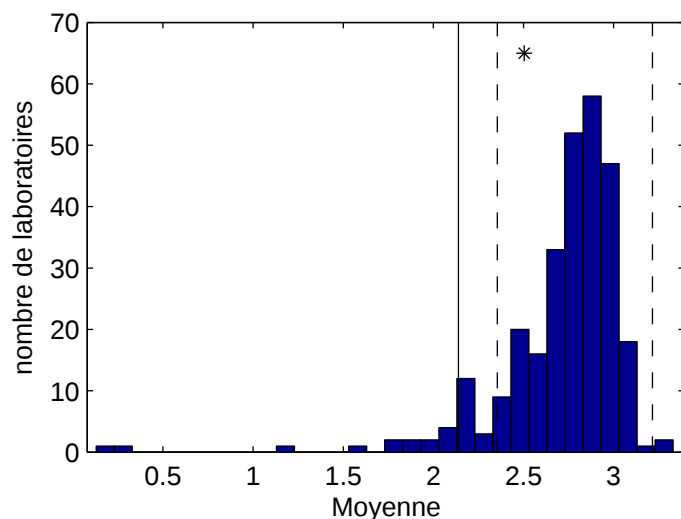

Résultats des laboratoires

Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 285

Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse statistique : 264

Valeur assignée de la contamination : 2.79


Ecart-type pour l'évaluation de l'aptitude : 0.215

Nb laboratoires satisfaisants ($-2.0 \leq z \leq 2.0$) : 252

Nb signes avertissement ($-3.0 < z < -2.0$ ou $2.0 < z < 3.0$) : 18

Nb signes action ($z \leq -3.0$ ou $z \geq 3.0$) : 15

Evolution de votre performance

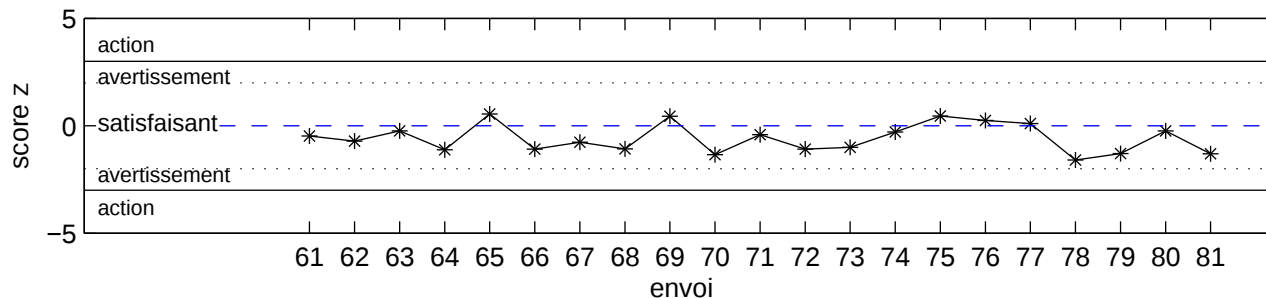

Campagne No 81 du 30 septembre 2025

Laboratoire No

RESULTATS JUSTESSE –ANAEROBES SULFITO–REDUCTEURS

Méthode utilisée : NF V 08-061

Vos résultats (ufc/g) : 200 / 0.1 / 140 / 0.1** / 0.1****


(log10 ufc/g) : 2.3 / -1 / 2.15 / -1** / -1****

**** Unité(s) non contaminée(s) donc non retenue(s) dans l'analyse statistique**

Moyenne : 2.22

Score z : -0.867

(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

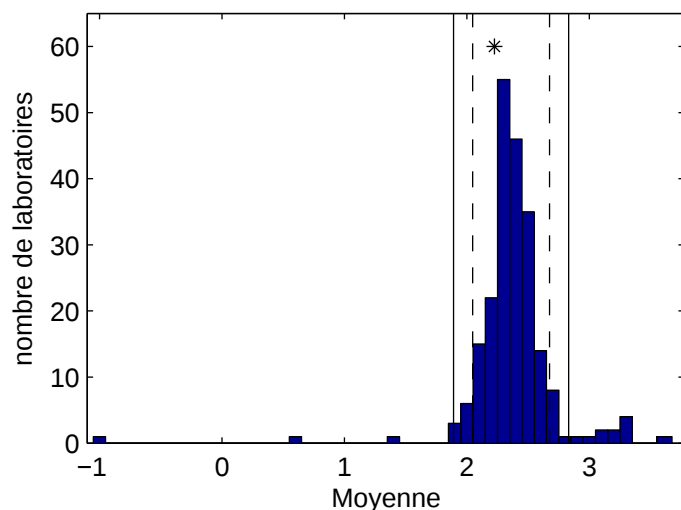

Résultats des laboratoires

Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 219

Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse statistique : 193

Valeur assignée de la contamination : 2.36


Ecart-type pour l'évaluation de l'aptitude : 0.157

Nb laboratoires satisfaisants ($-2.0 \leq z \leq 2.0$) : 190

Nb signes avertissement ($-3.0 < z < -2.0$ ou $2.0 < z < 3.0$) : 13

Nb signes action ($z \leq -3.0$ ou $z \geq 3.0$) : 16

Evolution de votre performance

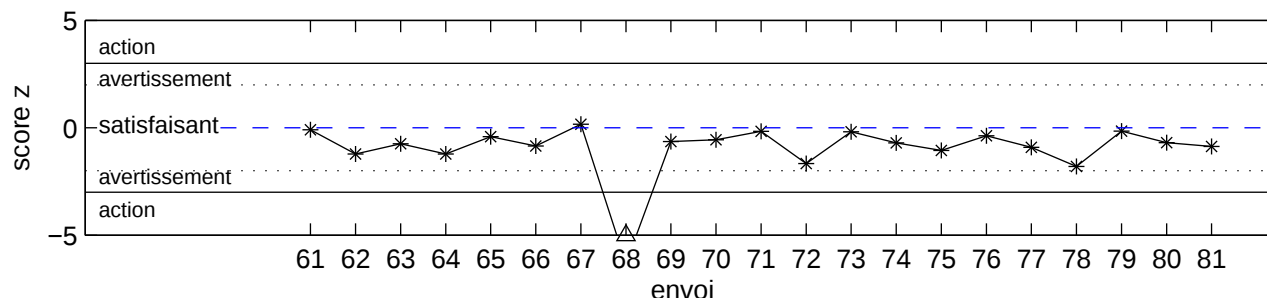

Edition : le 1er décembre 2025

page 7 / 26

Campagne No 81 du 30 septembre 2025

Laboratoire No

RESULTATS JUSTESSE –CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

Méthode utilisée : ISO/NF EN ISO 15213-2

Vos résultats (ufc/g) : 140 / 0.1 / 150 / 0.1** / 0.1****


(log10 ufc/g) : 2.15 / -1 / 2.18 / -1** / -1****

**** Unité(s) non contaminée(s) donc non retenue(s) dans l'analyse statistique**

Moyenne : 2.17

Score z : -1.12

(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

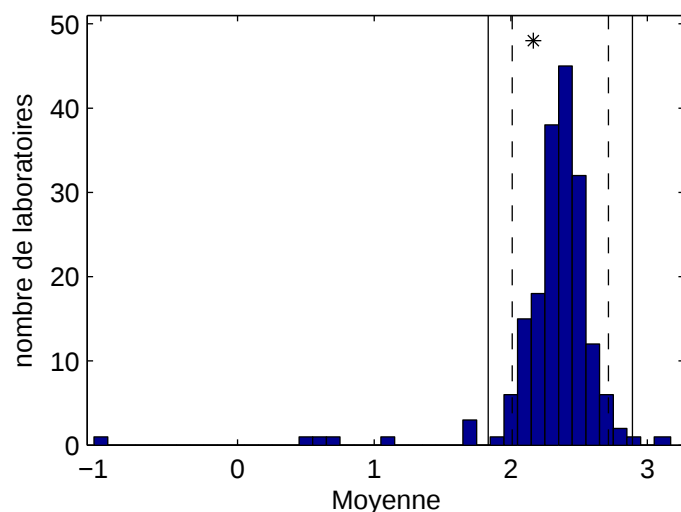

Résultats des laboratoires

Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 185

Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse statistique : 170

Valeur assignée de la contamination : 2.36


Ecart-type pour l'évaluation de l'aptitude : 0.176

Nb laboratoires satisfaisants ($-2.0 \leq z \leq 2.0$) : 169

Nb signes avertissement ($-3.0 < z < -2.0$ ou $2.0 < z < 3.0$) : 6

Nb signes action ($z \leq -3.0$ ou $z \geq 3.0$) : 10

Evolution de votre performance

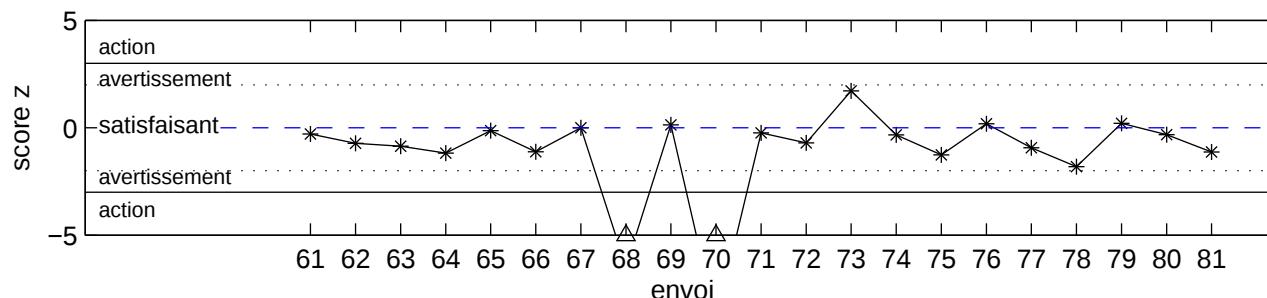

Edition : le 1er décembre 2025

page 8 / 26

Campagne No 81 du 30 septembre 2025

Laboratoire No

RESULTATS JUSTESSE –STAPHYLOCOQUES A COAGULASE POSITIVE

Méthode utilisée : ISO/NF EN ISO 6888-2 (+A1)


Vos résultats (ufc/g) : 1300 / 2000 / 2000 / 2000 / 1200

(log10 ufc/g) : 3.11 / 3.3 / 3.3 / 3.3 / 3.08

Moyenne : 3.22

Score z : -1.01

(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

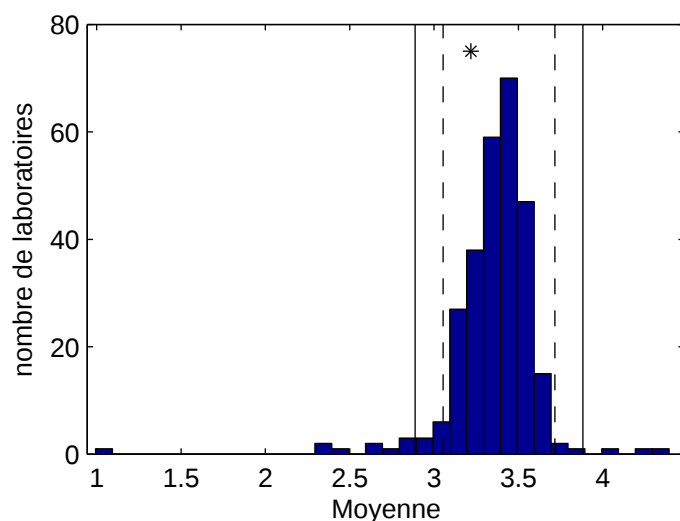

Résultats des laboratoires

Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 281

Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse statistique : 260

Valeur assignée de la contamination : 3.38


Ecart-type pour l'évaluation de l'aptitude : 0.166

Nb laboratoires satisfaisants ($-2.0 \leq z \leq 2.0$) : 260

Nb signes avertissement ($-3.0 < z < -2.0$ ou $2.0 < z < 3.0$) : 8

Nb signes action ($z \leq -3.0$ ou $z \geq 3.0$) : 13

Evolution de votre performance

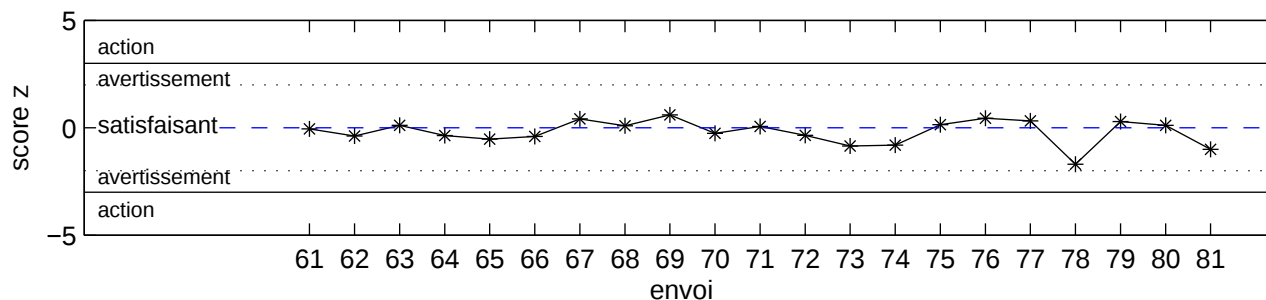

Campagne No 81 du 30 septembre 2025

Laboratoire No

RESULTATS JUSTESSE –*LISTERIA MONOCYTOGENES*

Méthode utilisée : ISO/NF EN ISO 11290–2

Vos résultats (ufc/g) : 860 / 0.1** / 1000 / 0.1** / 1000


(log10 ufc/g) : 2.93 / –1** / 3 / –1** / 3

**** Unité(s) non contaminée(s) donc non retenue(s) dans l'analyse statistique**

Moyenne : 2.98

Score z : –1.45

(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

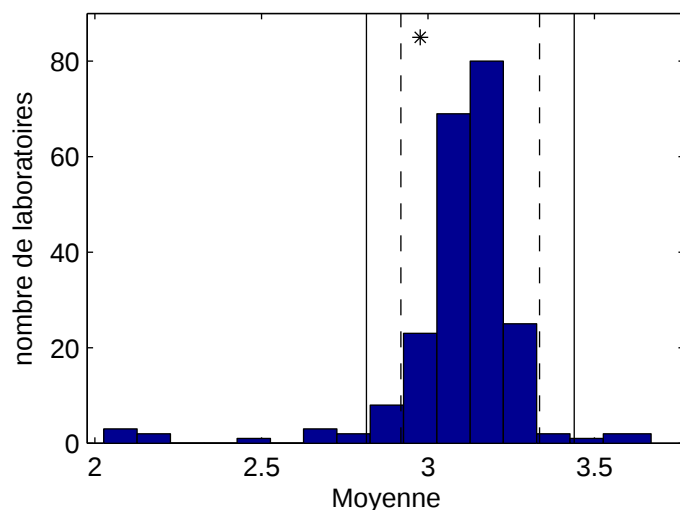

Résultats des laboratoires

Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 221

Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse statistique : 207

Valeur assignée de la contamination : 3.13


Ecart-type pour l'évaluation de l'aptitude : 0.104

Nb laboratoires satisfaisants ($-2.0 \leq z \leq 2.0$) : 199

Nb signes avertissement ($-3.0 < z < -2.0$ ou $2.0 < z < 3.0$) : 9

Nb signes action ($z \leq -3.0$ ou $z \geq 3.0$) : 13

Evolution de votre performance

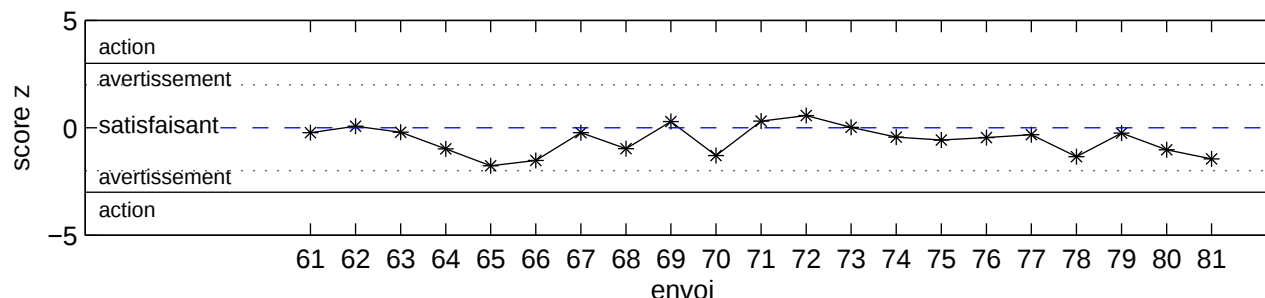

Campagne No 81 du 30 septembre 2025

Laboratoire No

RESULTATS FIDELITE –MICRO–ORGANISMES AEROBIES MESOPHILES

Méthode utilisée : ISO/NF EN ISO 4833-1(+A1)

Vos résultats (ufc/g) : 110000 / 120000 / 110000 / 150000 / 120000

(log10 ufc/g) : 5.04 / 5.08 / 5.04 / 5.18 / 5.08

Ecart-type : 0.0573

Indice : 5.44


(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

Résultats des laboratoires


Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 302

Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse statistique : 280

Ecart-type de fidélité de référence : 0.0491

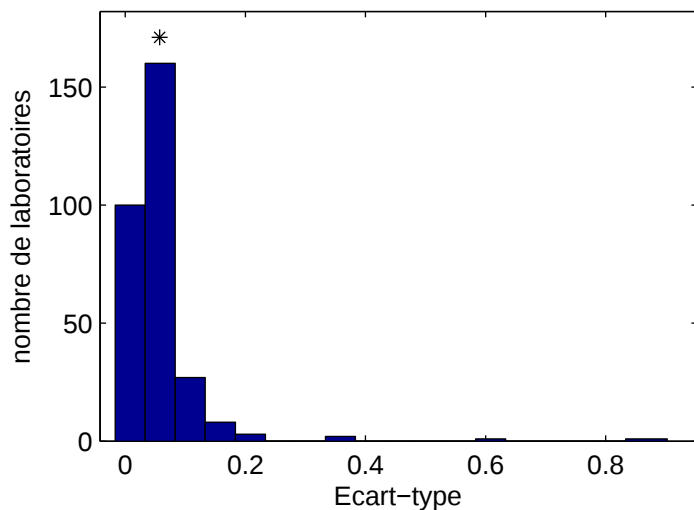

Evolution de votre performance

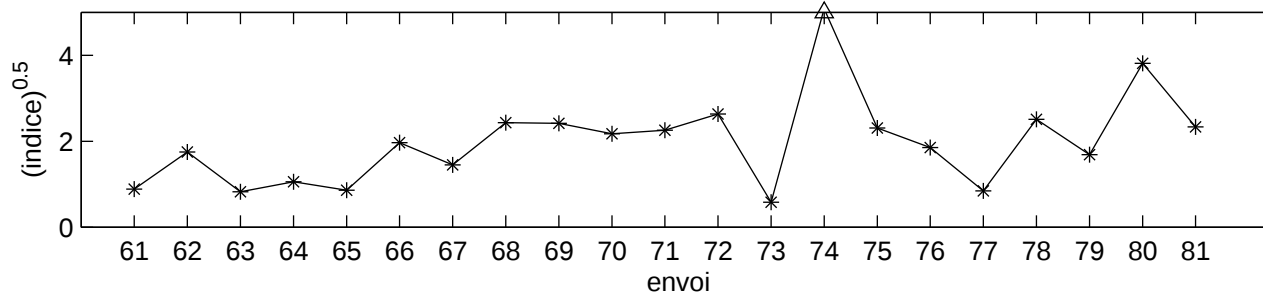

Campagne No 81 du 30 septembre 2025

Laboratoire No

RESULTATS FIDELITE –ENTEROBACTERIES

Méthode utilisée : NF V 08-054

Vos résultats (ufc/g) : 300 / 630 / 560 / 440 / 600
(log10 ufc/g) : 2.48 / 2.8 / 2.75 / 2.64 / 2.78

Ecart-type : 0.133

Indice : 9.39


(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

Résultats des laboratoires


Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 276

Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse
statistique : 257

Ecart-type de fidélité de référence : 0.0866

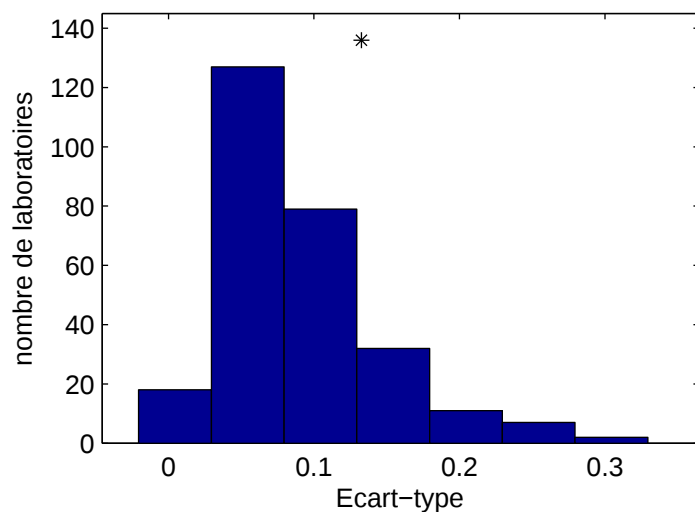

Evolution de votre performance

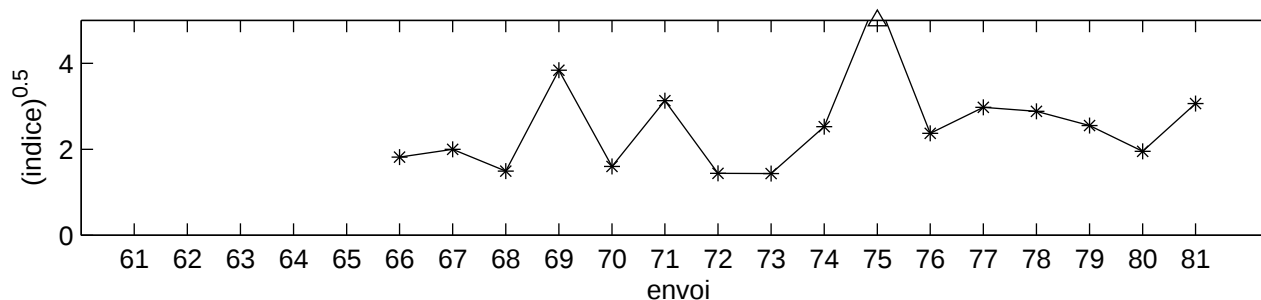

Campagne No 81 du 30 septembre 2025

Laboratoire No

RESULTATS FIDELITE –COLIFORMES TOTAUX

Méthode utilisée : NF V 08-050

Vos résultats (ufc/g) : 360 / 640 / 580 / 520 / 960

(log10 ufc/g) : 2.56 / 2.81 / 2.76 / 2.72 / 2.98

Ecart-type : 0.152

Indice : 15.1


(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

Résultats des laboratoires


Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 214

Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse statistique : 198

Ecart-type de fidélité de référence : 0.0783

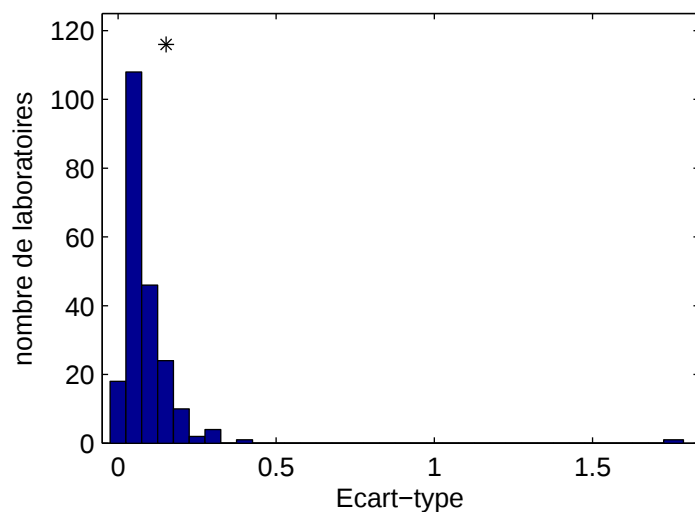

Evolution de votre performance

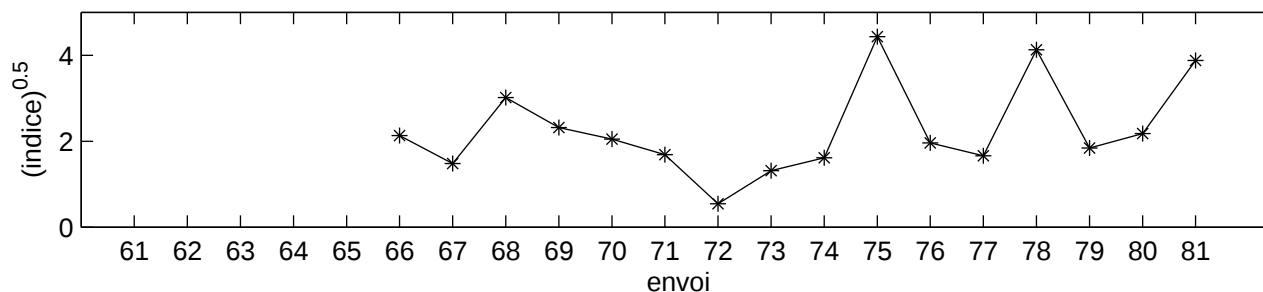

Campagne No 81 du 30 septembre 2025

Laboratoire No

RESULTATS FIDELITE –COLIFORMES THERMOTOLERANTS

Méthode utilisée : NF V 08-060

Vos résultats (ufc/g) : 240 / 270 / 360 / 230 / 300

(log10 ufc/g) : 2.38 / 2.43 / 2.56 / 2.36 / 2.48

Ecart-type : 0.0807

Indice : 3.91


(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

Résultats des laboratoires


Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 188

Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse
statistique : 174

Ecart-type de fidélité de référence : 0.0817

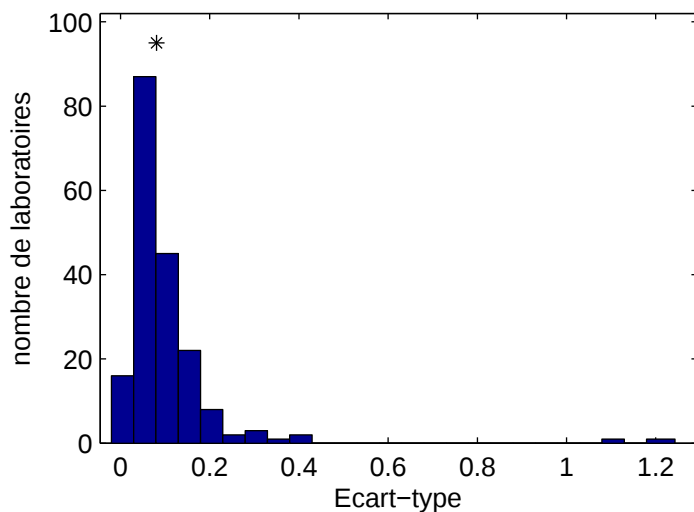

Evolution de votre performance

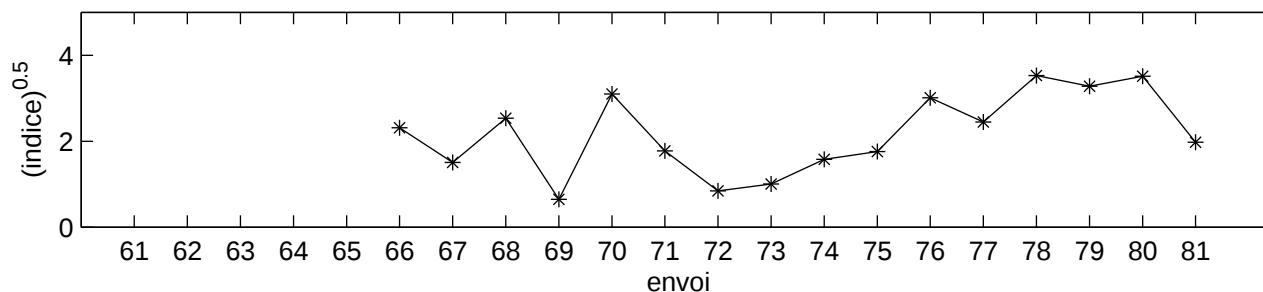

Campagne No 81 du 30 septembre 2025

Laboratoire No

RESULTATS FIDELITE –*ESCHERICHIA COLI*

Méthode utilisée : ISO/NF ISO 16649-2

Vos résultats (ufc/g) : 230 / 350 / 300 / 400 / 350

(log10 ufc/g) : 2.36 / 2.54 / 2.48 / 2.6 / 2.54

Ecart-type : 0.091

Indice : 5.56


(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

Résultats des laboratoires


Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 285

Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse
statistique : 264

Ecart-type de fidélité de référence : 0.0772

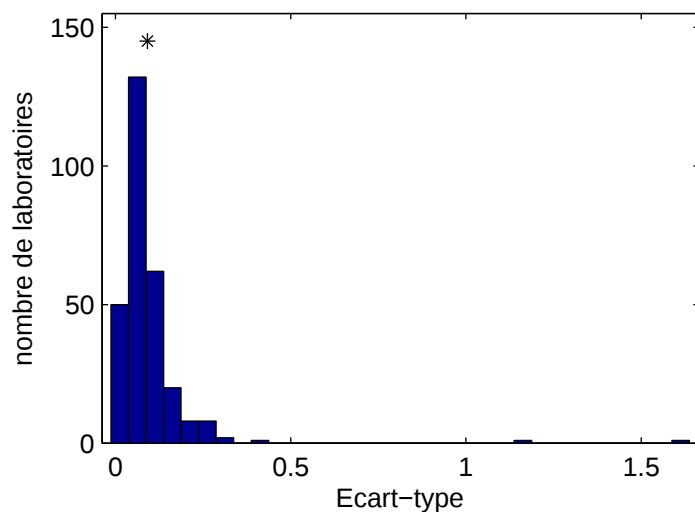

Evolution de votre performance

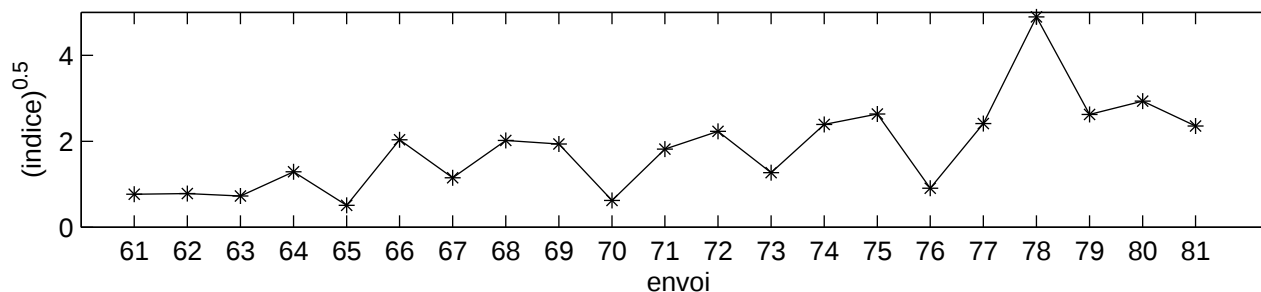

Campagne No 81 du 30 septembre 2025

Laboratoire No

RESULTATS FIDELITE –ANAEROBIES SULFITO–REDUCTEURS

Méthode utilisée : NF V 08–061

Vos résultats (ufc/g) : 200 / 0.1** / 140 / 0.1** / 0.1**


(log10 ufc/g) : 2.3 / –1** / 2.15 / –1** / –1**

**** Unité(s) non contaminée(s) donc non retenue(s) dans l'analyse statistique**

Ecart-type : 0.106

Indice : 1.16

(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

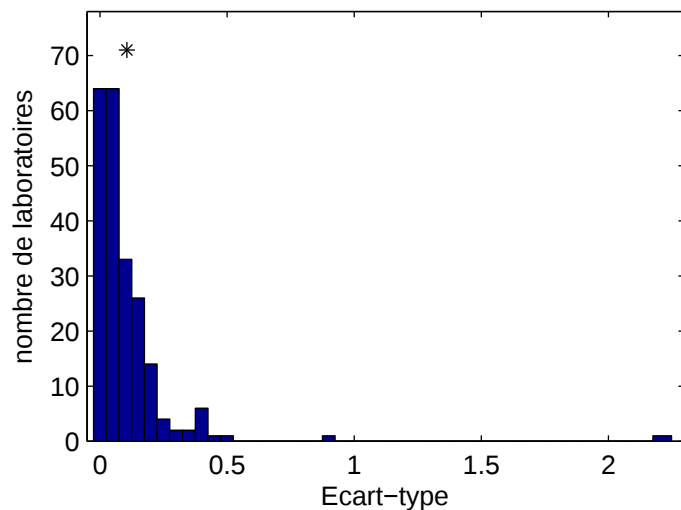


Résultats des laboratoires

Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 219

Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse statistique : 193

Ecart-type de fidélité de référence : 0.0984

Evolution de votre performance

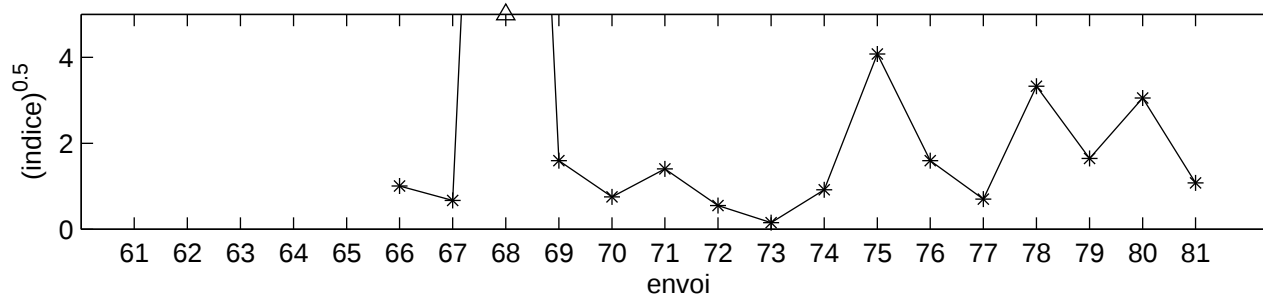

Campagne No 81 du 30 septembre 2025

Laboratoire No

RESULTATS FIDELITE –CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

Méthode utilisée : ISO/NF EN ISO 15213-2

Vos résultats (ufc/g) : 140 / 0.1 / 150 / 0.1** / 0.1****


(log10 ufc/g) : 2.15 / -1 / 2.18 / -1** / -1****

**** Unité(s) non contaminée(s) donc non retenue(s) dans l'analyse statistique**

Ecart-type : 0.0212

Indice : 0.0443

(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

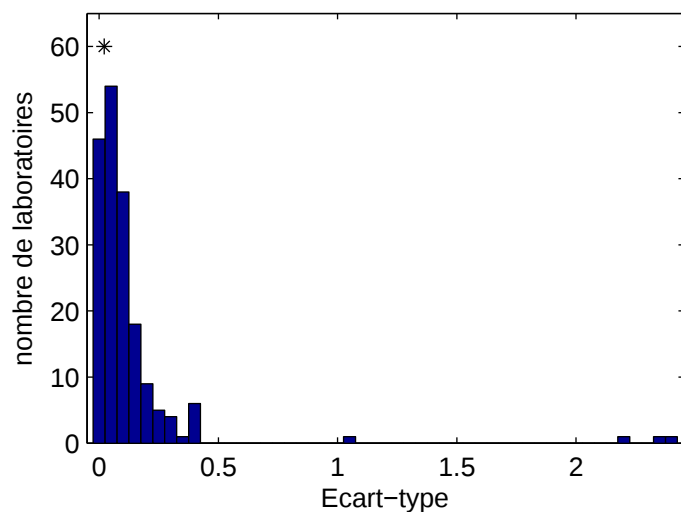


Résultats des laboratoires

Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 185

Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse statistique : 170

Ecart-type de fidélité de référence : 0.101

Evolution de votre performance

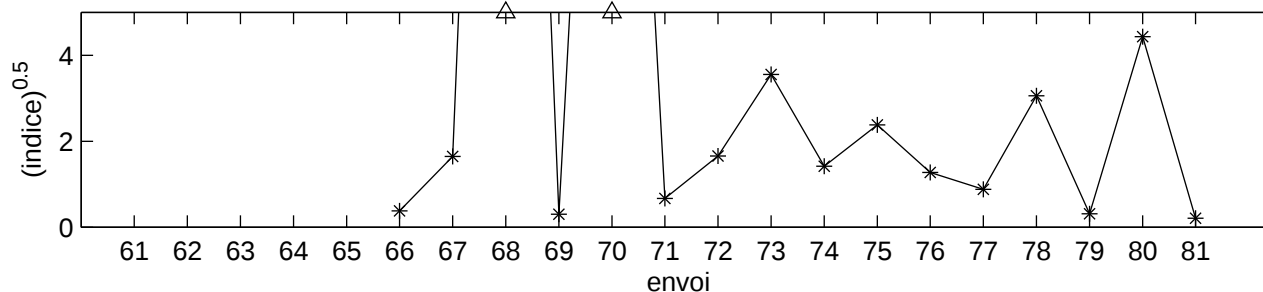

Edition : le 1er décembre 2025

page 17 / 26

Campagne No 81 du 30 septembre 2025

Laboratoire No

RESULTATS FIDELITE –STAPHYLOCOQUES A COAGULASE POSITIVE

Méthode utilisée : ISO/NF EN ISO 6888-2 (+A1)

Vos résultats (ufc/g) : 1300 / 2000 / 2000 / 2000 / 1200

(log10 ufc/g) : 3.11 / 3.3 / 3.3 / 3.3 / 3.08

Ecart-type : 0.113

Indice : 7.97


(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

Résultats des laboratoires


Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 281

Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse statistique : 260

Ecart-type de fidélité de référence : 0.0799

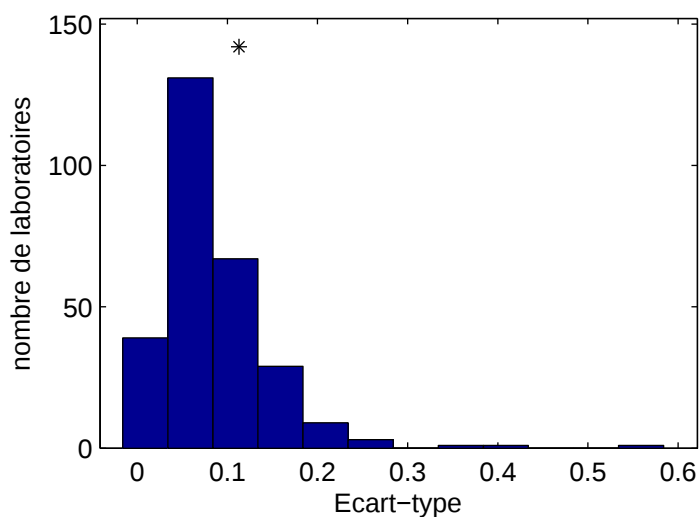

Evolution de votre performance

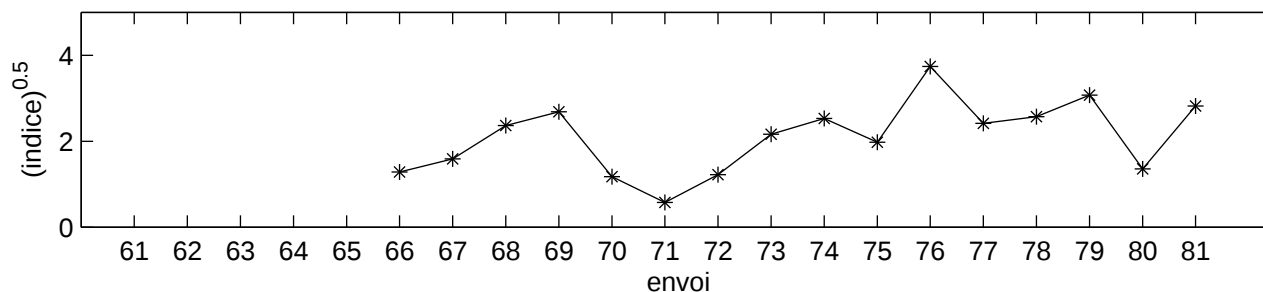

Campagne No 81 du 30 septembre 2025

Laboratoire No

RESULTATS FIDELITE –*LISTERIA MONOCYTOGENES*

Méthode utilisée : ISO/NF EN ISO 11290–2

Vos résultats (ufc/g) : 860 / 0.1 / 1000 / 0.1** / 1000**

(log10 ufc/g) : 2.93 / –1 / 3 / –1** / 3**

**** Unité(s) non contaminée(s) donc non retenue(s) dans l'analyse statistique**

Ecart-type : 0.0404

Indice : 0.603


(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

Résultats des laboratoires


Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 221

Nombre de laboratoires inclus dans l'analyse statistique : 207

Ecart-type de fidélité de référence : 0.0736

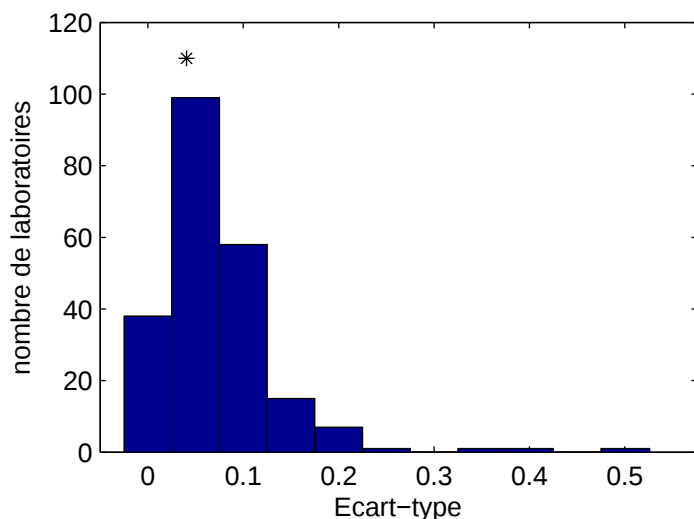

Evolution de votre performance

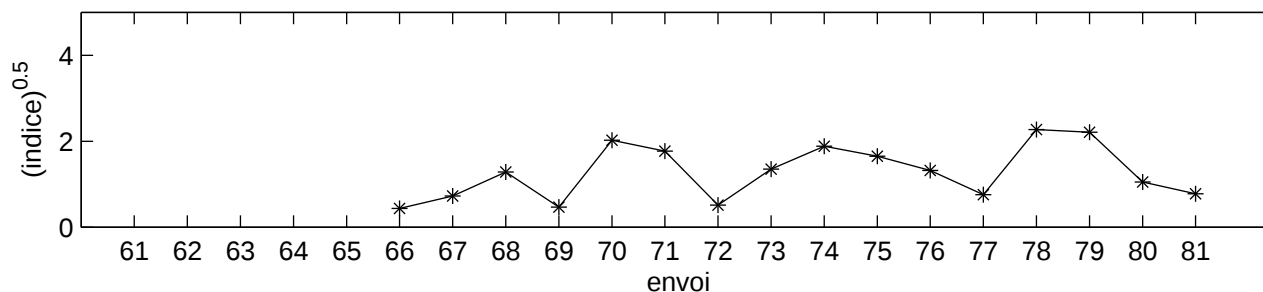

Campagne No 81 du 30 septembre 2025
Laboratoire No


RESULTATS DETECTION – SALMONELLA

Méthode utilisée : AFNOR BKR-23/07-10/11 (IRIS Salmonella)

Vos résultats (détection dans 25 g) : non / non** / oui / non** / non****

**** Unité(s) non contaminée(s)**

(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

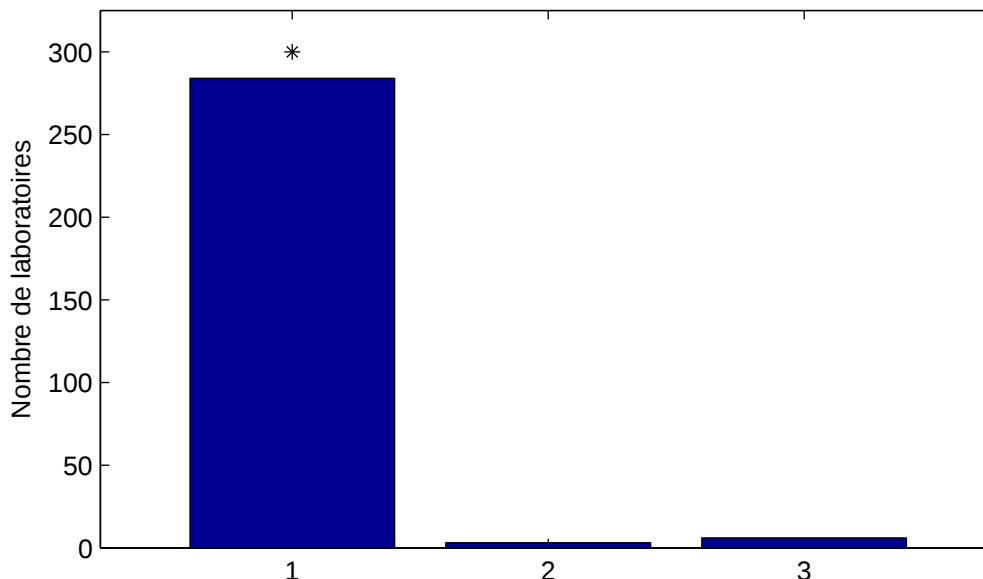

Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 287


Nombre de laboratoires justes : 279

1 : détection unité(s) contaminée(s) – 284 laboratoires

2 : unité(s) contaminée(s) non détectée(s) (faux-négatifs) – 3 laboratoires

3 : détection d'unité(s) non contaminée(s) (faux-positifs) – 6 laboratoires

Evolution de votre performance

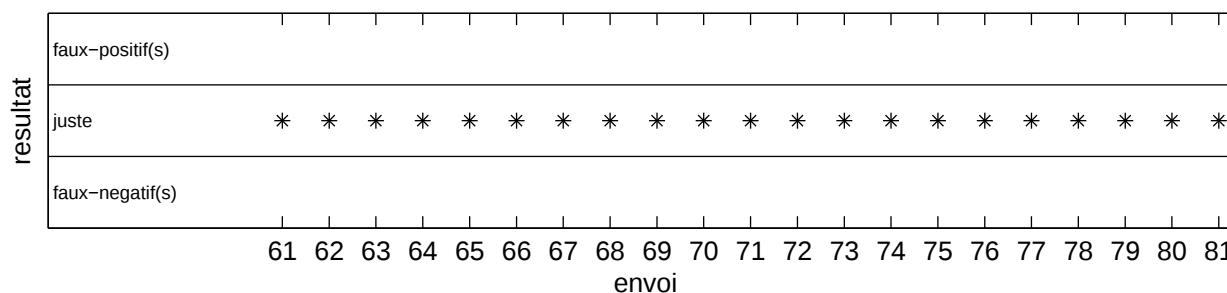

Campagne No 81 du 30 septembre 2025
Laboratoire No


RESULTATS DETECTION – *LISTERIA MONOCYTOGENES*

Méthode utilisée : ISO/NF EN ISO 11290–1

Vos résultats (détection dans 25 g) : oui / non / oui / non** / oui**

**** Unité(s) non contaminée(s)**

(Le symbole * signale la position de votre laboratoire)

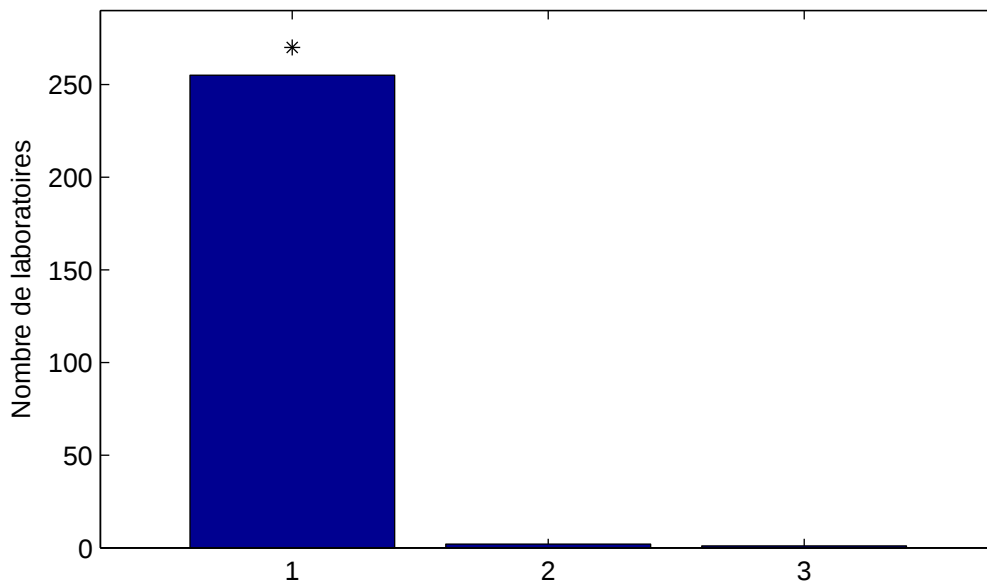

Nombre de laboratoires réalisant l'essai : 257


Nombre de laboratoires justes : 254

1 : détection unité(s) contaminée(s) – 255 laboratoires

2 : unité(s) contaminée(s) non détectée(s) (faux-négatifs) – 2 laboratoires

3 : détection d'unité(s) non contaminée(s) (faux-positifs) – 1 laboratoire

Evolution de votre performance

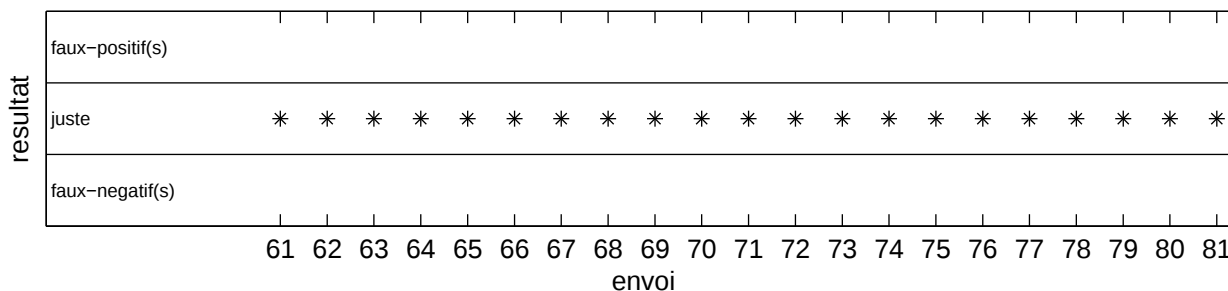


Campagne No 81 du 30 septembre 2025


Laboratoire No

EVOLUTION DE VOTRE PERFORMANCE – RECAPITULATIF (1/5)


JUSTESSE – MICRO-ORGANISMES AEROBIES MESOPHILES

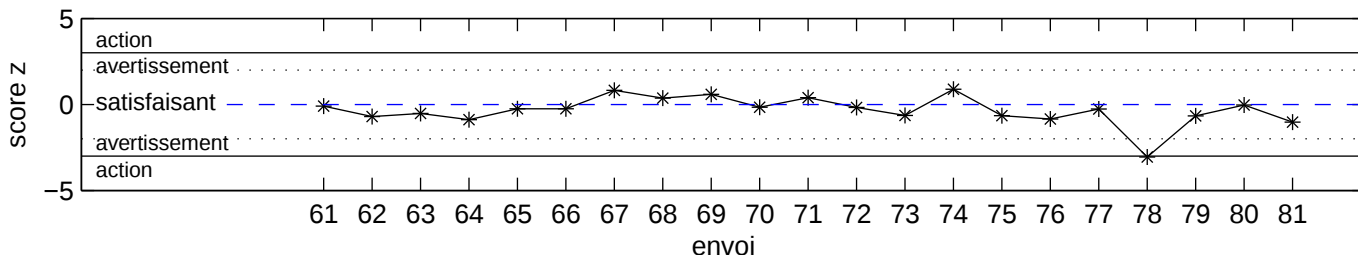


JUSTESSE – ENTEROBACTERIES

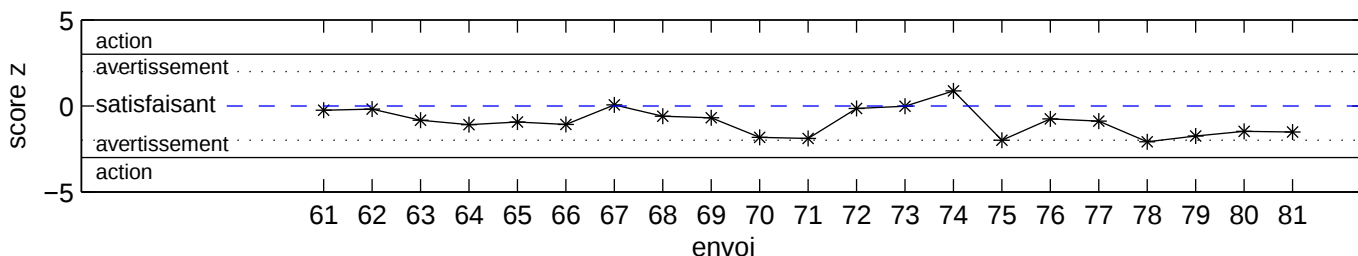


JUSTESSE – COLIFORMES TOTAUX

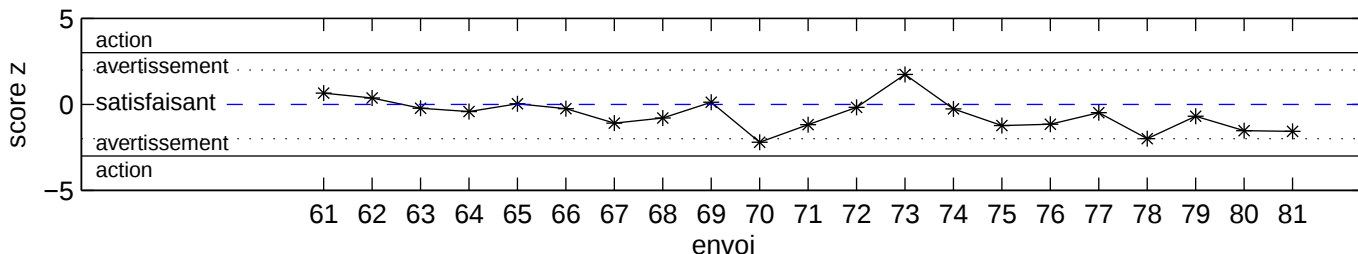

JUSTESSE – COLIFORMES THERMOTOLERANTS

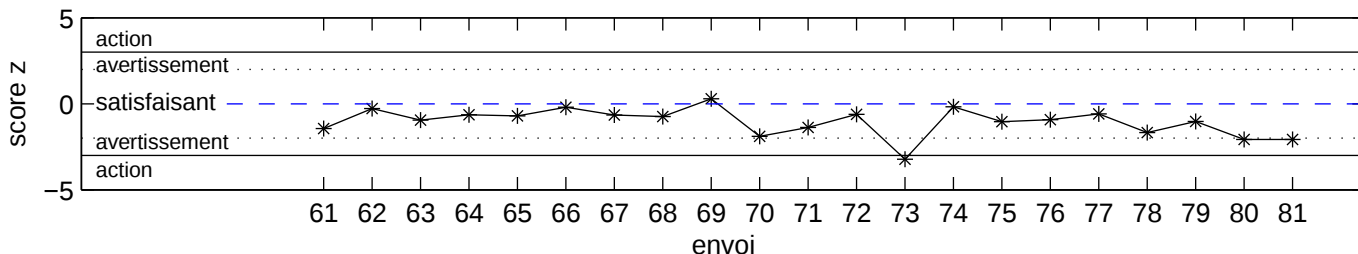

JUSTESSE – ESCHERICHIA COLI

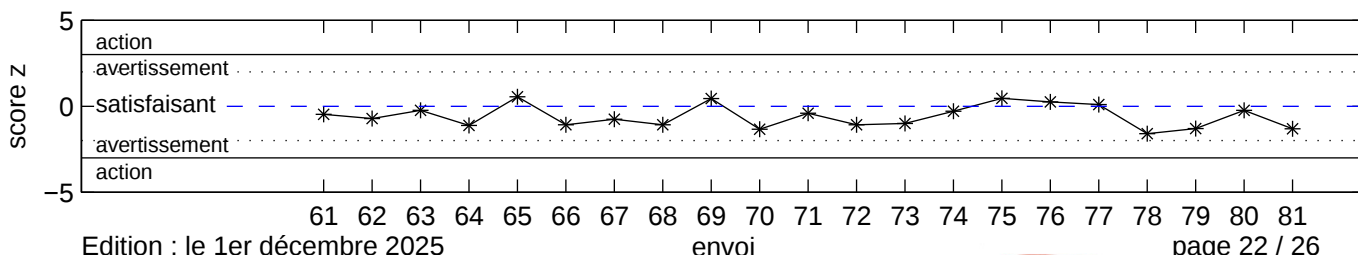

Edition : le 1er décembre 2025

Association ASA – Adresse postale
149 rue de Bercy, 75012 Paris


page 22 / 26

Campagne No 81 du 30 septembre 2025


Laboratoire No

EVOLUTION DE VOTRE PERFORMANCE – RECAPITULATIF(2/5)


JUSTESSE – ANAEROBIES SULFITO-REDUCTEURS

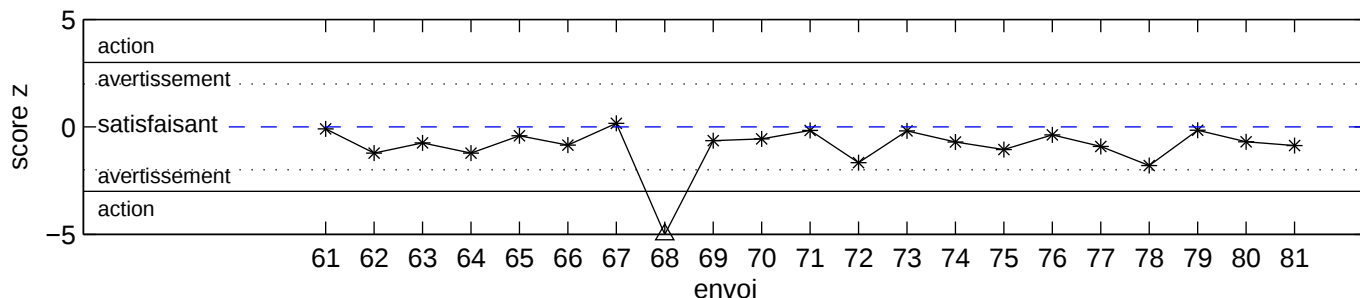


JUSTESSE – CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

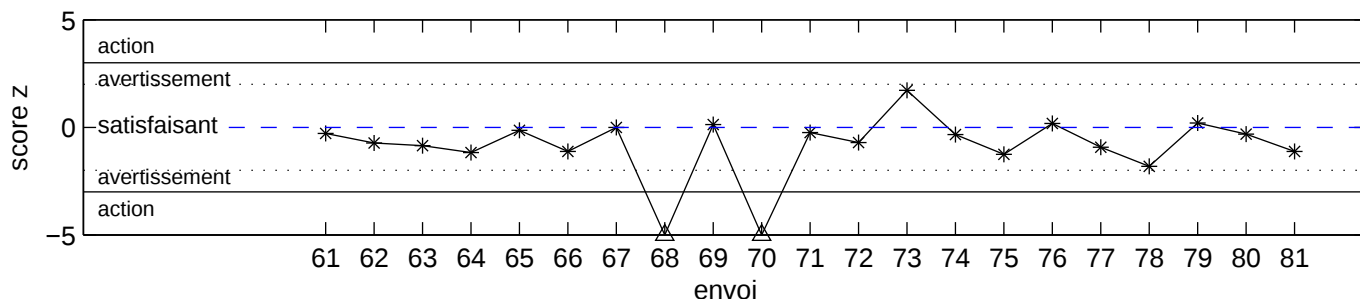

JUSTESSE – STAPHYLOCOQUES A COAGULASE POSITIVE

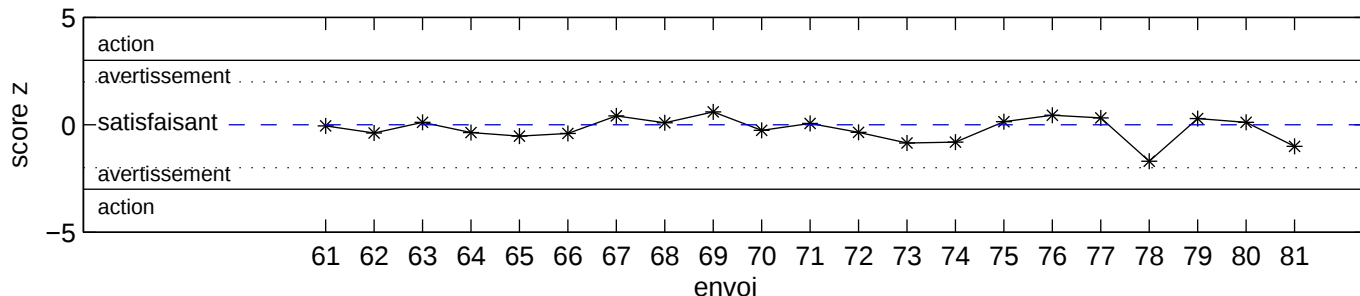

JUSTESSE – LISTERIA MONOCYTOGENES

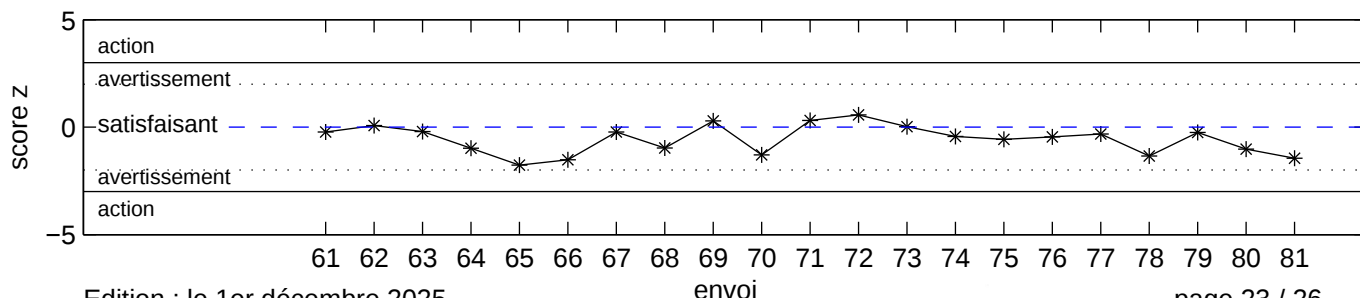

Edition : le 1er décembre 2025


Association ASA – Adresse postale
149 rue de Bercy, 75012 Paris

Campagne No 81 du 30 septembre 2025


Laboratoire No

EVOLUTION DE VOTRE PERFORMANCE – RECAPITULATIF(3/5)


FIDELITE – MICRO-ORGANISMES AEROBIES MESOPHILES

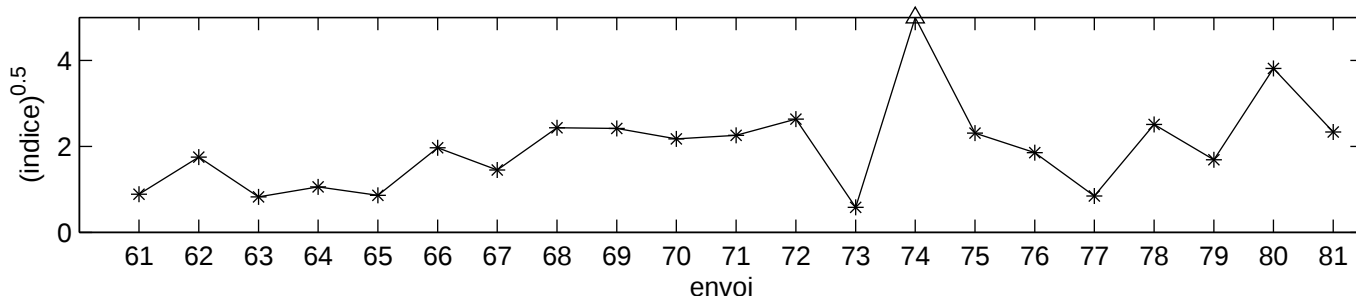


FIDELITE – ENTEROBACTERIES

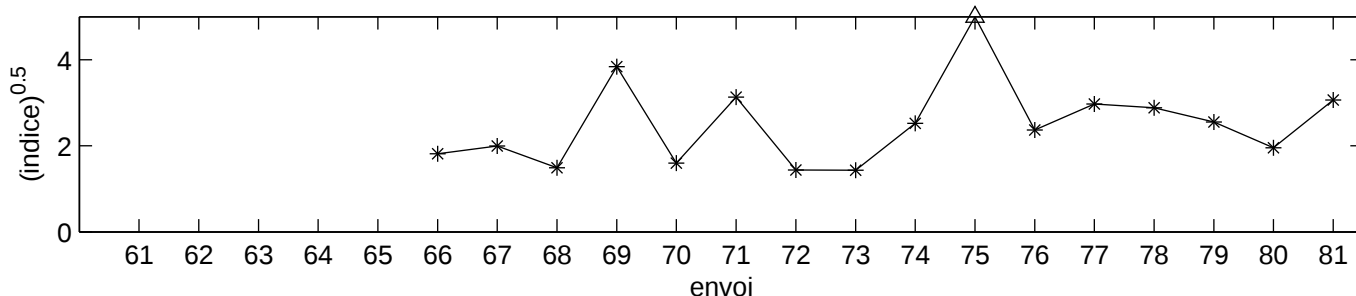

FIDELITE – COLIFORMES TOTAUX

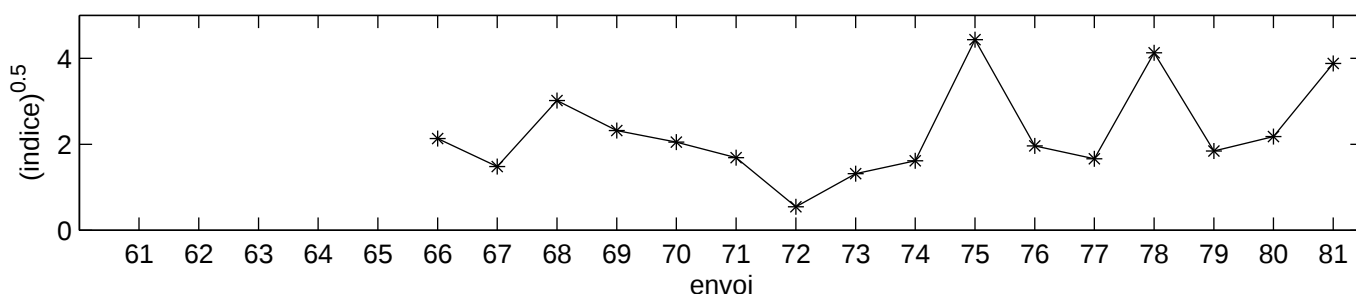

FIDELITE – COLIFORMES THERMOTOLERANTS

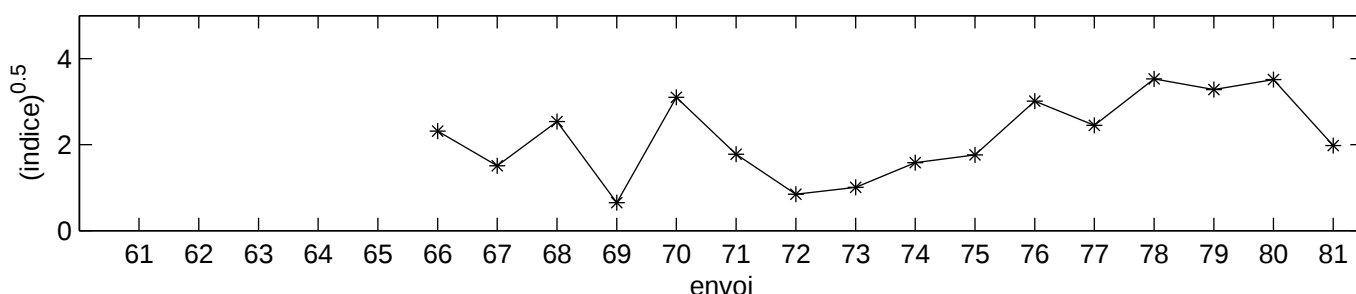


Campagne No 81 du 30 septembre 2025


Laboratoire No

EVOLUTION DE VOTRE PERFORMANCE – RECAPITULATIF(4/5)


FIDELITE – ESCHERICHIA COLI

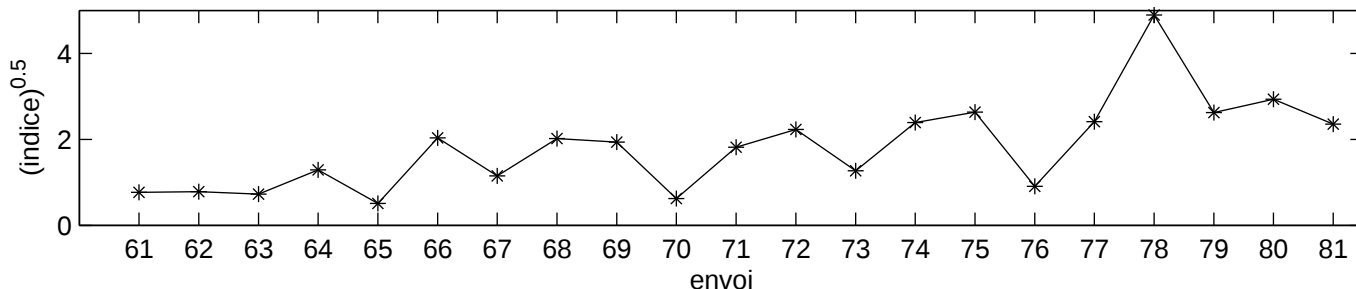


FIDELITE – ANAEROBIES SULFITO-REDUCTEURS

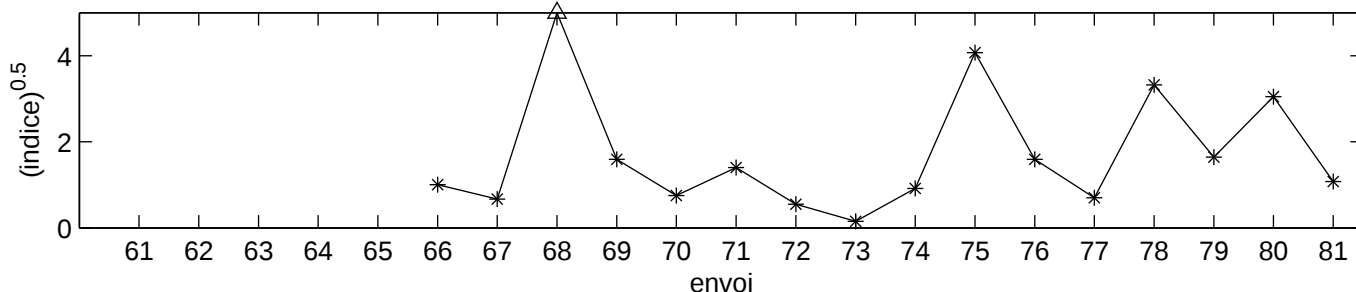

FIDELITE – CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

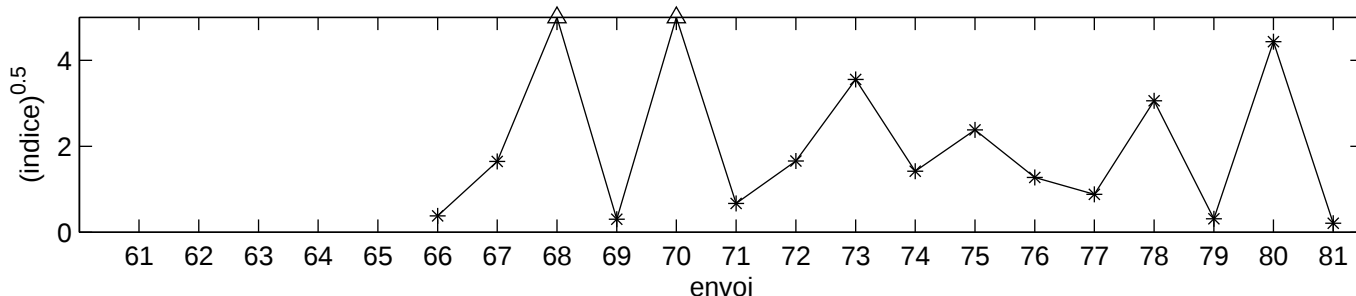

FIDELITE – STAPHYLOCOQUES A COAGULASE POSITIVE

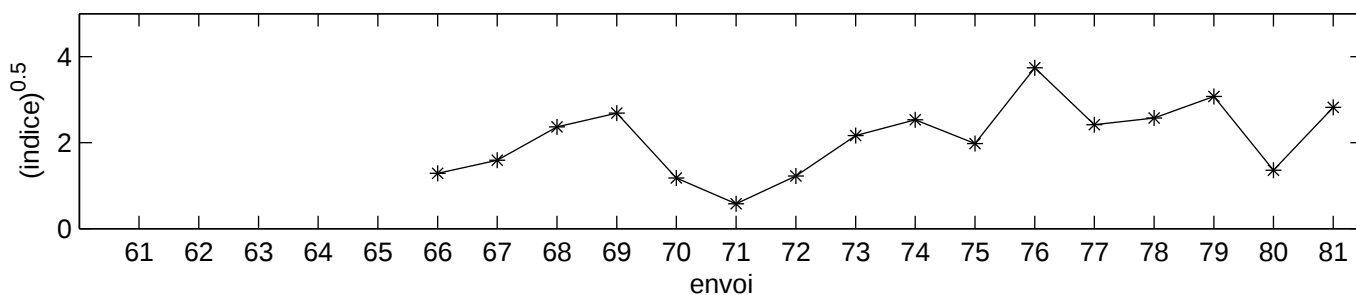


Campagne No 81 du 30 septembre 2025


Laboratoire No

EVOLUTION DE VOTRE PERFORMANCE – RECAPITULATIF(5/5)

FIDELITE – LISTERIA MONOCYTOGENES

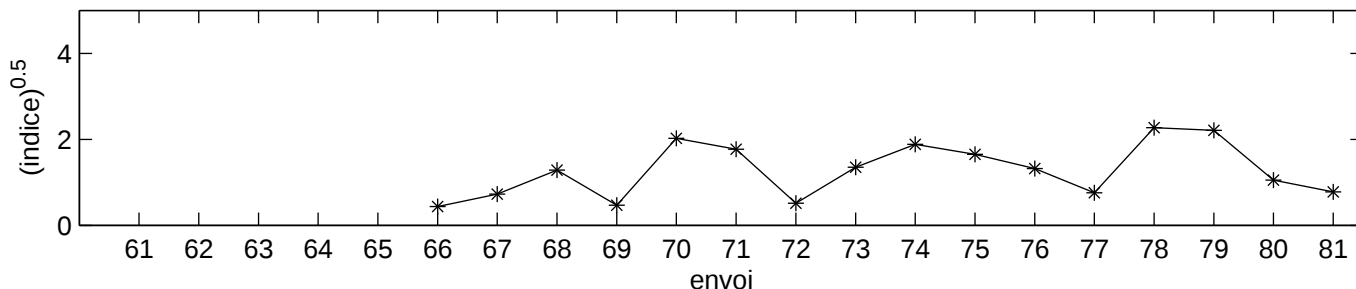

DETECTION – SALMONELLA

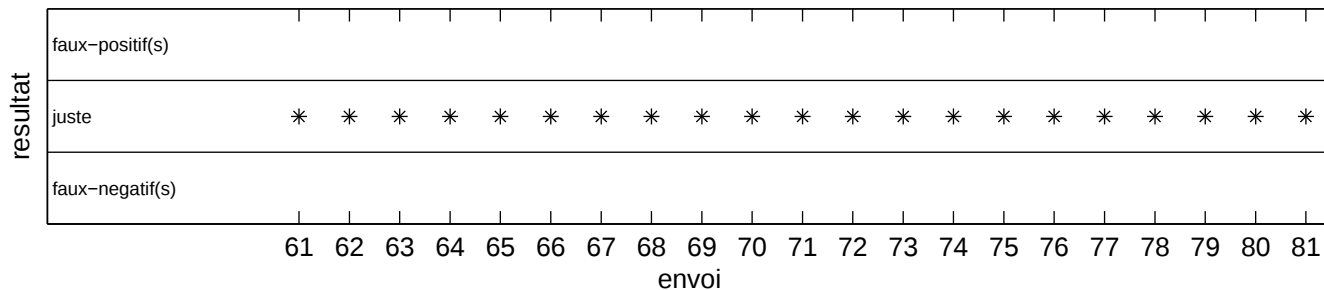

DETECTION – LISTERIA MONOCYTOGENES

